



medical **ECONET**
GERMANY



PHYSIO-PORT

24 Stunden Langzeit-Blutdruckmessgerät

- Innovative Aufwärtsmessung
- Messzeit ca. 15 Sekunden
- Schnelle und präzise Erfassung der einzelnen Blutdruckwerte
- Zuverlässige Unterdrückung von Bewegungsartefakten
- Verbindung per USB - Kabel mit dem PC
- Integrierte GDT Schnittstelle
- Inklusive Manschette für Erwachsene, USB Verbindungskabel und Gürteltasche

PHYSIO-PORT

Der PHYSIO-PORT ist ein handliches und mobiles Blutdruckmessgerät zur Langzeitmessung des nicht-invasiven Blutdrucks bei Erwachsenen, Kindern und Kleinkindern. Der PHYSIO-PORT kann bis zu 48 Stunden (400 Messungen) in unterschiedlichen Abständen Blutdruckmessungen durchführen und die Messergebnisse speichern.

Durch die oszillometrische Arbeitsweise kann auf störende Mikrofone und Elektroden verzichtet werden.

Der sehr kurze Messvorgang (ca. 15 Sekunden) kann durch die innovative Aufwärtsmessung realisiert werden. Die integrierte Aufwärtsmessung, das geringe Gewicht und das ergonomische Design gewährleisten einen sehr hohen Komfort für den Patienten. Die intuitiv zu bedienende Auswerte-Software erleichtert durch einfache Rekorder-Programmierung sowie schnelle und sichere Datenübertragung das tägliche Arbeiten mit dem System.

Im Lieferumfang enthalten sind:

- PHYSIO PORT Langzeit-Blutdruck Rekorder
- Manschette für Erwachsene
- Rekordertasche mit Gürtel
- Anschlusskabel zum PC
- Analysesoftware auf CD-ROM


PHYSIO-PORT Leistungsprofil

- oszillometrisches Messverfahren, Aufwärtsmessung
- Speicher bis zu 48 Stunden (max. 400 Messwerte)
- bis zu 4 frei programmierbare Messintervalle
- 3 verschiedenen Messprogramme
- Tag-/Nacht-Taste
- Auslösen von Zusatzmessungen möglich
- LCD Display zur Anzeige der Messwerte
- Metall-Anschluss für Manschette
- unterschiedliche Manschettengrößen erhältlich
- PC-Anschluss über USB-Schnittstelle
- Betrieb mit 2 AA Batterien
- Abmessungen 105 x 80 x 27 mm
- Gewicht ca. 190 Gramm inklusive Batterien
- integrierte GDT Schnittstelle

- 1 Startbildschirm
- 2 Patientensuche



- 3 Auswertung

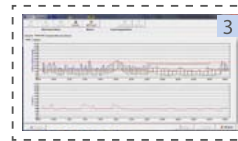

Spezifikationen

Abmessungen 80 mm (B) x 105 mm (T) x 27 mm (H)



PC-Voraussetzungen

Betriebssystem	Windows 7 / 8 / 10
Prozessor	mind. 1,6 GHz Dual Core
Arbeitsspeicher	mind. 2 GB RAM
Festplatte	empf. Mind. 500 GB
Schnittstelle	1 freier USB Port

CE 0123



Im Erlengrund 20, 46149 Oberhausen - Germany

t: +49 (0) 208 377 890-0 info@medical-econet.com
f: +49 (0) 208 377 890-55 www.medical-econet.com
facebook.com/medicaleconetgermany
twitter.com/medicaleconet

Fachhändler

*Änderungen und Druckfehler behalten wir uns vor